


特徴

家から出ようとする徘徊初動を検知（介護保険レンタル）
家から出てしまった徘徊行動を把握（オプションサービス）

「お出かけアラートDX」での徘徊初動検知イメージ

お出かけ端末を専用シューズに格納
アラート発信機を下駄箱に格納した場合

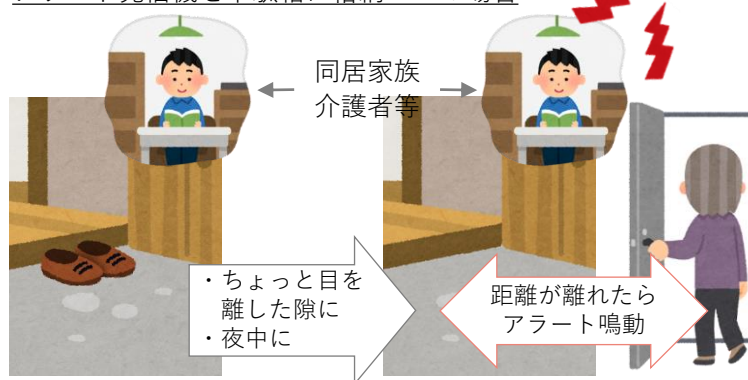

同居家族
介護者等

・ちょっと目を
離れた際に
・夜中に

見守り対象者
～在宅～

距離が離れたら
アラート鳴動

見守り対象者
～外出⇨徘徊の初動～



お出かけ端末

アラート発信機

「お出かけアラートDX」
オプションサービス
(介護保険レンタルの対象外)
専用nano-SIMの契約（お出かけ
端末にnano-SIMを差し込み）が
必要になります。

機能等

1. お出かけアラートDXでの徘徊初動検知（認知症老人徘徊感知機器）

介護保険レンタル

✓ 認知症高齢者等見守り対象者が、お出かけ端末を持って屋外に出ると、
介護者等にアラート発信機からのアラート音でお知らせします。

* 見守り対象者が屋外に出る時に必ずお出かけ端末を所持する必要がありますので、
お出かけ端末を別売の専用シューズに格納してのご利用を推奨しています。

✓ お出かけ端末は、一回の満充電で約1ヶ月ご利用いただけます。

* 検知間隔によります。また、介護保険対象外のオプションサービス併用時を除く。

2. お出かけアラートDXオプションサービスでの徘徊行動把握

介護保険レンタル + オプションサービス費用

* オプションサービス利用契約時は、nano-SIM契約事務手数料3,850円(税込)が必要です。

✓ 認知症高齢者等見守り対象者の外出中の見守りも行いたい場合に、
徘徊初動検知に付加してご利用いただくオプションサービスです。

* オプションサービスは、専用nano-SIMの契約（お出かけ端末にnano-SIMを差し込み）が必要になります。

✓ オプションサービスでは、お出かけ端末にGPS機能を付帯して、
見守り対象者の位置情報を専用WEBアプリのマップ上でご確認いただけます。

✓ 見守り対象者が、事前に設定した行動範囲から出た場合、
介護者等に位置情報のメール通知を行います。

✓ 見守り対象者が、お出かけ端末のSOSボタンを押した場合、
介護者等に位置情報のメール通知を行います。

専用WEBアプリ

mamo-L Welfare スマホ版 ▶



仕様

製品サイズ・重量	アラート発信機：110mm×140mm×45mm・270g *スイッチ等突起物含まず。 お出かけ端末：47mm×40mm×17mm・約42g
バッテリー	アラート発信機：AC100V（ACアダプタ付） お出かけ端末：リチウム電池600mAh
検知方法	BLE信号（Bluetooth Low Energy） *アラート発信機とお出かけ端末との距離
検知間隔	60秒間隔（初期設定 *設定変更可能）
アラート方法	本発信機からアラート音 *本発信機とお出かけ端末が一定距離を離れることにより、BLE信号を2回（設定変更可能）検知しなかった場合に、アラート音が鳴ります。
アラート発信機 筐体表面（LED）	青：電源パイロットランプ 緑：お出かけ端末の探知確認 黄：お出かけ端末の搜索中 赤：お出かけ端末の検知できず
アラート発信機 筐体裏面	電源スイッチ、データ設定用スイッチ（白・黒）、外部出力用イヤホンジャック
その他	*アラート発信機からの有線引き回しによるスピーカー設置も可能（別売） *お出かけ端末に専用nano-SIM格納で徘徊見守りも可能（オプションサービス）