超高齢化社会を高齢者の皆様が 安心・安全に暮らせる見守りを支援する

mamo-L Welfare Series

Smamo-L.jp



介護保険レンタル対象製品

認知症老人徘徊感知機器

製品番号:TRKM_MMLBLE01 TAISコード:02097-000004





+




お出かけ端末 (Welfare BLE)

機能イメージ

介護保険レンタル対象(認知症老人徘徊感知機器)

ご自宅等からの徘徊初動をアラート音でお知らせ

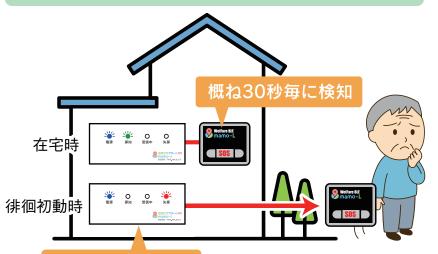

概ね3m離れると アラート音が鳴動

介護保険対象外(GPS通信)

外出後の徘徊行動を見守り



GPS機能付加

お出かけ端末を、うららかGPSウォークシリーズに入れてご利用いただけます。

mamo-L端末を 格納できる うららかGPS ウォークシリーズ







お出かけアラートDXのご利用方法

①納入時の設置方法

●アラート発信機

付属の専用ACアダプタを接続して、コンセントにつなぎます。

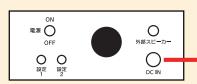

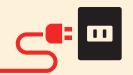

●お出かけ端末

充電後、電源を入れて靴 (うららかGPSウォーク)等に装着します。

準備は これだけ!







お出かけ端末と アラート発信機が 概ね3m離れると アラート音鳴動



在宅検知中



徘徊初動感知 ※アラート音鳴動



初動感知後の検知中 ※アラート音鳴動なし

- ●ご自宅等からの徘徊初動感知時はアラート音でお知らせします。
- 1) 徘徊初動感知時のアラート音は約5秒で一旦止みます。
- 2) 次の検知タイミングに

お出かけ端末を検知できればアラート音は鳴りません。 お出かけ端末を検知できなければアラート音が再度鳴ります。

3) 以下、同様です。

③GPS機能付加で外出後の 徘徊行動を見守ります。

●専用WEBアプリでの登録が必要です。 ※GPS機能付加には専用nano-SIMを格納します。





徘徊初動感知時に保護できずに屋外へ徘徊し てしまっても、専用WEBアプリ上で現在位置情 報及び移動履歴による追跡や、メール通知機 能等で徘徊行動を把握でき、早期発見に繋が ります。

お出かけアラートDX』のレンタル・お申し込みについて

- ① お住まい地域の「福祉用具貸与事業者」にご相談ください。
- ② ①の事業者でお取り扱いがない場合は、弊社にお問合せください。

詳細資料のダウンロード



◀お出かけアラートDXのデモ動画

詳細資料(徘徊見守りソリューション含む)



QRコードから、弊社Googleドライブ内に保存されているデータを視聴・ダウンロードできます。 *QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

提供元

株式会社マモエル

東京都千代田区神田小川町3-2-10 三光ビル4F ⊠contact11@mamo-l.jp

- ☎ 03-6811-0532 (平日9:00~18:00)
 - *土日祝祭日及び年末年始・ゴールデンウィーク・お盆は休日。
 - *電話でお問合せの場合は、受付担当がお受けし、 別途担当者よりご連絡させていただきます。

https://mamo-l.jp

マモエル

